

PODO MIX LINE UPGRADE

NEW 2022



The **PODO MIX LINE** chairs have been subject to an **IMPORTANT UPGRADE** of the **ELECTRIC SYSTEM** (motors and controls).

Le poltrone della **LINEA PODO MIX** sono state sottoposte ad un **IMPORTANTE MIGLIORAMENTO** del **SISTEMA ELETTRICO** (motori e comandi).

CONTENTS / CONTENUTI

ELECTRONICS & CONTROLS / PARTI ELETTRICHE & COMANDI	2
PODO MIX 3M	3
PODO MIX 2M	4
PODO MIX 1M	5

ELECTRONICS & CONTROLS

PARTI ELETTRICHE & COMANDI

NEW 2022



MORE PERFORMING PIÙ PERFORMANTE

The electronics of PODO MIX LINE products is more performing and the chairs can lift greater loads, while remaining very silent during adjustment.

L'elettronica dei prodotti della LINEA PODO MIX risulta più performante e le poltrone possono sollevare carichi maggiori, rimanendo al contempo molto silenziose durante i movimenti.



PLUG&PLAY CONTROLS COMANDI PLUG&PLAY

The controls, which were previously connected from the inside, are now "PLUG & PLAY", that means they are connected from the outside and can be easily removed by a technician.

Se prima i comandi erano collegati internamente, ora si presentano in modalità "PLUG & PLAY", ossia collegati esternamente ed estraibili più facilmente da un tecnico.

GARANZIA PIÙ LUNGA LONGER WARRANTY

1 YEAR - Mattress heating
3 YEARS - Electrical parts and controls
5 YEARS - Undeformable foam
5 YEARS - Actuators
LIFETIME - Base

1 ANNO - Riscaldamento materasso
3 ANNI - Parti elettriche e comandi
5 ANNI - Gomma indeformabile
5 ANNI - Attuatori
LIFETIME - Struttura






PEDALIERA PODO MIX 3M


The new PODO MIX 3M foot pedal set has a clean, essential and ergonomic design. In addition to the classic HEIGHT, BACK and SEAT movements, it features MEMORY, AUT and END functions.

La nuova pedaliera di PODO MIX 3M si presenta con un design pulito, essenziale ed ergonomico. Oltre ai classici movimenti di ALTEZZA, SCHIENA e SEDUTA, presenta le funzioni MEMORIE, AUT ed END.

3M

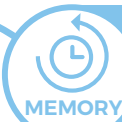

NEW

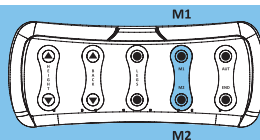


MEMORY FUNCTION FUNZIONE MEMORIE

It allows to memorize up to 2 POSITIONS, so as to adjust the chair easily and quickly by simply pressing a button.

Permette di memorizzare fino a 2 POSIZIONI, così da regolare la poltrona facilmente e velocemente premendo semplicemente un pulsante.

AUT & END FUNCION FUNZIONE AUT & END

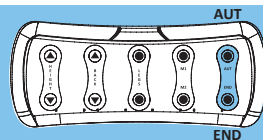

NEW


AUT
&
END

AUT FUNCTION: automatic return from any position to the "End of treatment" position (flat, raised backrest and minimum height).

END FUNCTION: automatic return from any position to the zero position (flat and minimum height)

FUNZIONE AUT: ritorno automatico da qualsiasi posizione alla posizione "Fine trattamento" (piatto, schiena sollevata e altezza minima)

FUNZIONE END: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione zero (piatto e altezza minima)

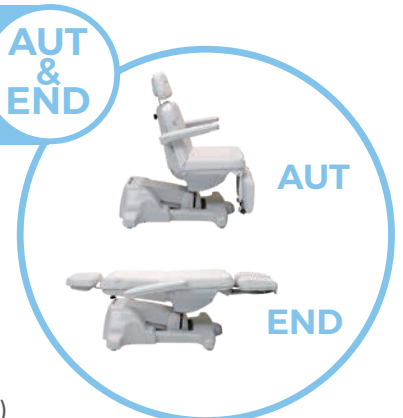



PEDALIERA PODO MIX 2M

The new PODO MIX 2M pedal control has a clean, essential and ergonomic design. The two sections of the BACK and HEIGHT movements suitably separated and the intuitive icons make using this pedal more practical and faster.


La nuova pedaliera di PODO MIX 2M si presenta con un design pulito, essenziale ed ergonomico. Le due sezioni dei movimenti ALTEZZA e GAMBE opportunamente separate e le icone intuitive rendono l'utilizzo di questa pedaliera più pratico e veloce.

2M



AUT

NEW

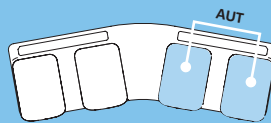

AUT FUNCTION
FUNZIONE AUT

AUT FUNCTION: automatic return from any position to the "End of treatment" position (flat, raised backrest and minimum height).

FUNZIONE AUT: ritorno automatico da qualsiasi posizione alla posizione "Fine trattamento" (piatto, schiena sollevata e altezza minima)

SEAT/LEGS ADJUSTMENT REGOLAZIONE SEDUTA/GAMBE

The electric control for the movement of height and seat/legs allows you to set the bed in the best position, according to the needs, to carry out treatments respecting the safety of the doctor and the wellness of the patient.

I comandi elettrici per la movimentazione di altezza e seduta/gambe permette di impostare il lettino nella posizione migliore, secondo necessità, per effettuare trattamenti rispettando la sicurezza del medico ed il benessere del paziente.



NEW 2022



PEDALIERA PODO MIX 1M

The new PODO MIX 1M foot pedal has a clean, essential and ergonomic design, featuring UP & DOWN functions for height adjustment.

La nuova pedaliera di PODO MIX 1M si presenta con un design pulito, essenziale ed ergonomico, mantenendo le due funzioni UP & DOWN per regolazione altezza.

1M



MANUAL ADJUSTMENT REGOLAZIONE MANUALE

BACK: is easily adjustable by means of a **gas spring** with levers under the seat. This mechanism is studied to gently accompany the adjustment.

SEAT/LEGS: To adjust the trendelenburg inclination, rotate the tilting handle to **OPEN** position; once the correct position has been reached, rotate the handle to **CLOSE** position. Check the tilting handle is always closed before the patient sits on the chair.

SCHIENA: si regola facilmente attraverso una leva con **molla a gas** sotto la seduta.

Il meccanismo è studiato per accompagnare gradualmente il movimento.

SEDUTA/GAMBE: Per regolare l'inclinazione trendelenburg, ruotare la maniglia di inclinazione in posizione **APERTA**; una volta raggiunta la posizione corretta, ruotare la maniglia in posizione **CHIUSO**. Controllare che la maniglia di inclinazione sia sempre chiusa prima che il paziente si sieda sulla poltrona.

MANUAL ZAK HEAD ADJUSTMENT REGOLAZIONE TESTA ZAK MANUALE

The large and comfortable Zak headrest of Podo Mix 1M can be adjusted manually using a practical knob located behind the backrest. By unscrewing it gently, the head can be easily removed, while for the inclination it is enough to gently push the head forward or backward with two hands.

L'ampia e comoda testa Zak di Podo Mix 1M può essere regolata manualmente tramite una pratica manopola posta dietro lo schienale. Svitandola delicatamente è possibile estrarre facilmente la testa, mentre per l'inclinazione basta spingere delicatamente la testa con due mani avanti o indietro.





Brusaferrri & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

www.lemigroup.it